

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАГРУЗКЕ


ИОЛ Liberty в инжектор MediceL ACCUJECT

LIBERTY[®]

1 Возьмите инжектор ACCUJECT в левую руку. Указательным пальцем левой руки коснитесь верхнего крыла картриджа так, чтобы в процессе работы вы могли им управлять




2 Заполните вискоэластиком носик картриджа (А) и борозды загрузочной камеры (В), куда укладывается линза. Нанесите каплю вискоэластика на кончик плунжера (С).

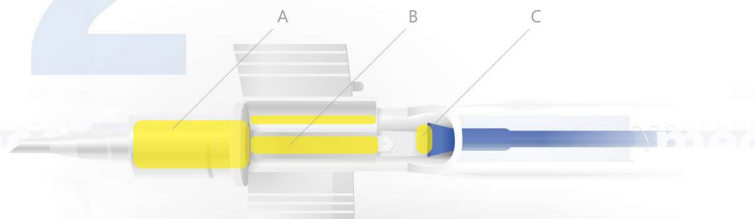


3 Откройте контейнер и извлеките ИОЛ из фиксаторов, взяв ее пинцетом за оптико-гаптическое соединение, не касаясь оптики. Используйте гладкие пинцеты, чтобы избежать повреждения линзы



4 Для обеспечения правильной ориентации линзы в капсульном мешке после имплантации, расположите линзу в форме буквы «S» в середине загрузочной камеры.

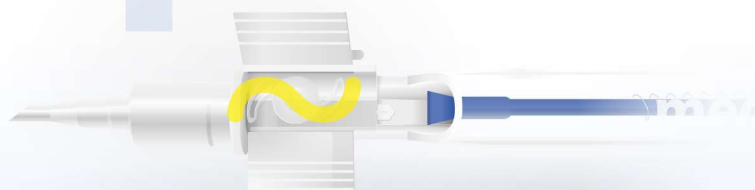

5 Прижмите и удерживайте линзу в нужном положении (слегка разведите концы пинцета так чтобы они совместились с краями оптики, захватывая гаптику) чтобы обеспечить надежное закрепление края оптико-гаптической части.

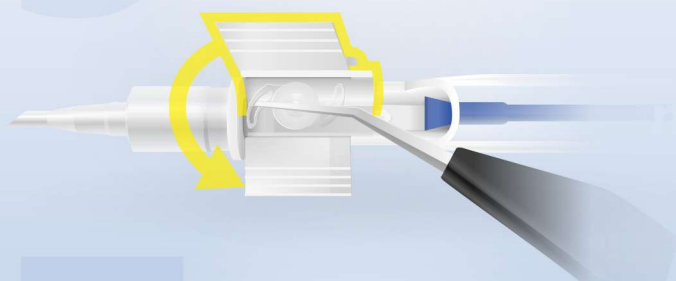

6 Закройте картридж, сведите боковые части картриджа (крылья) вместе до щелчка. Визуально убедитесь, что линза симметрично сложена внутри загрузочной камеры и не зажата



7 Примените технику «проталкивания-вытягивания»:

- Сначала протолкните линзу вперед в коническую часть носика картриджа.
- Затем потяните плунжер назад, пока силиконовый наконечник не отделится от заднего гаптического элемента.
- Снова проталкивайте линзу вперед медленно и контролируемо, пока линза полностью не развернется.



MEDICENTUR

Данное краткое руководство носит исключительно рекомендательный характер и демонстрирует основные этапы установки интраокулярной линзы Liberty в инжектор ACCUJECT. Перед имплантацией интраокулярной линзы Liberty с помощью инжектора ACCUJECT внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю/дистрибьютору.