


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАГРУЗКЕ


ИОЛ 1stQ AddOn в инжектор Medice ACCUJECT

1stQ AddOn


1 Возьмите инжектор ACCUJECT в левую руку
Указательным пальцем левой руки коснитесь верхнего крыла картриджа так, чтобы в процессе работы вы могли им управлять

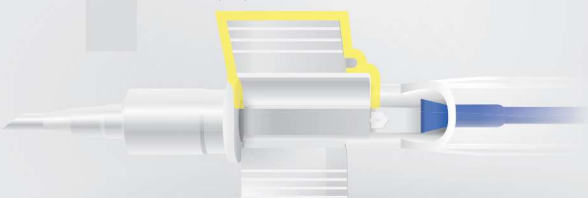


2 Заполните вискоэластиком носик картриджа (A) и борозды загрузочной камеры (B).
Нанесите каплю вискоэластика на кончик плунжера (C).

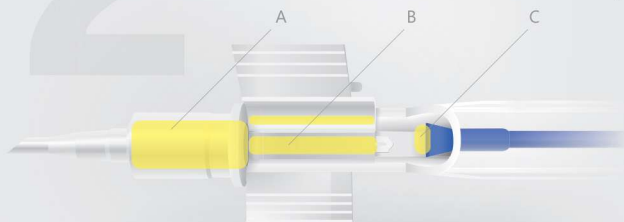


3 Расположение линзы:
Метки должны находиться на 4 часа справа и на 10 часов слева от гаптики

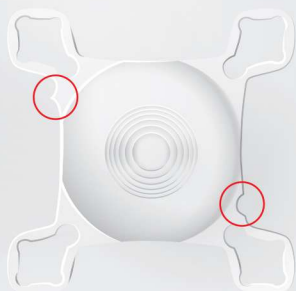


4 Расположите линзу в загрузочной камере в положении «перевернутая U»: n
Убедитесь, что края гаптики надежно зафиксированы под направляющими.

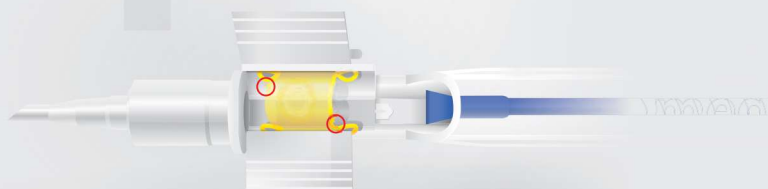

5 С помощью пинцета удерживайте линзу в нужном положении, чтобы край оптики надежно оставался под направляющими

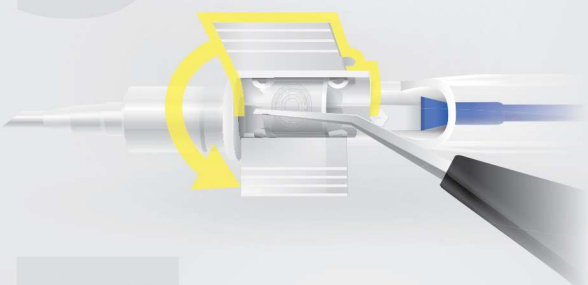


6 Закройте картридж, сведите боковые части картриджа (крылья) вместе до щелчка. Визуально убедитесь, что линза симметрично сложена внутри загрузочной камеры и не зажата

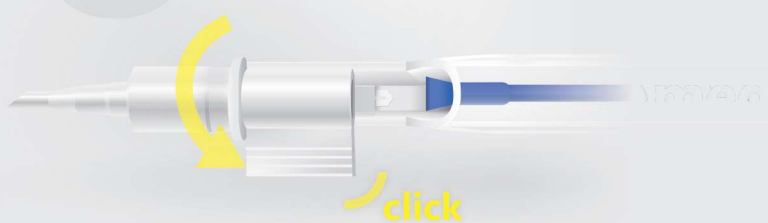

7 Примените технику «проталкивания-вытягивания»:

- Сначала протолкните линзу вперед в коническую часть носика картриджа.
- Затем потяните плунжер назад, пока силиконовый наконечник не отделится от заднего гаптического элемента.
- Снова проталкивайте линзу вперед медленно и контролируемо, пока линза полностью не развернется.

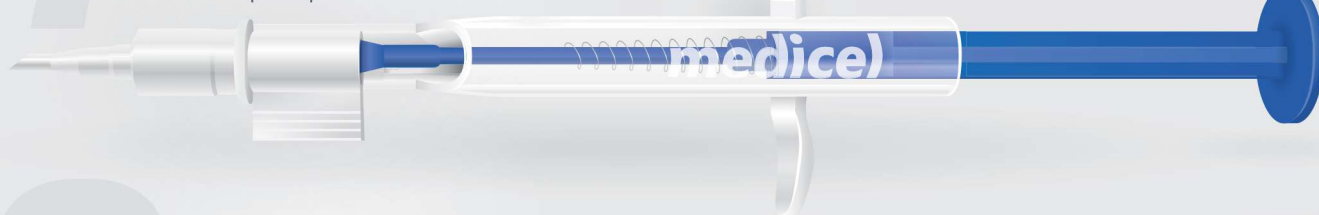

8 Проверьте правильность расположения линзы в цилиарной борозде

Данное краткое руководство носит исключительно рекомендательный характер и демонстрирует основные этапы установки ИОЛ 1stQ AddOn в инжектор ACCUJECT. Перед имплантацией ИОЛ 1stQ AddOn с помощью инжектора ACCUJECT внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю / дистрибьютору.